

Tabourets de douche Etac Edge, Easy et Smart

Une gamme complète de petits tabourets de douche pratiques. Tous les tabourets sont munis de contours d'assise souples et d'une surface antidérapante agrémentée de trous de drainage ovales. Ces caractéristiques leur confèrent stabilité et confort. Le choix du tabouret dépend de l'espace disponible dans la douche, des fonctions souhaitées et des préférences de chacun.



Tabouret de douche Etac Edge

Ce tabouret est parfaitement adapté à l'angle de la douche où les murs fournissent une stabilité arrière à l'utilisateur. Il peut également être placé dans l'autre sens pour former un siège en forme de selle, ce qui permet de soulager la pression sur une hanche douloureuse. Disponible en version basse également.

Tabouret de douche Etac Easy

Facile à utiliser et à déplacer. Son assise ronde est toujours dans la bonne position. Également disponible avec un coussin pivotant.

Tabouret de douche Etac Smart

Un confort maximal, que vous vous asseyiez sur le côté long ou le côté court. Il est proposé également avec un coussin pivotant ou en version basse, auquel cas il peut servir de siège de baignoire. Les tabourets bas sont idéaux lorsque des soins doivent être dispensés.




Caractéristiques



Facilement adaptable
Grâce à la fonction de verrouillage par bouton-poussoir, régler les pieds ou les retirer se fait facilement.



Stabilité
Pour garantir la stabilité, les pieds sont orientés vers l'extérieur. Ainsi, plus le siège est haut, plus la surface est large.

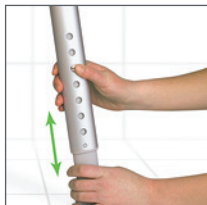

Facile et sûr
La forme ovale permet d'éviter que les pieds télescopiques ne tournent lors du réglage de la hauteur.



Embouts avec prise ferme
Les embouts évacuent l'eau et s'adaptent parfaitement au sol.

Accessoires



Coussins d'assise

Modèle Edge : 81801132

Modèle Smart : 80209502

Modèle Easy : 80209501

Les coussins d'assise antidérapants donnent une sensation de chaleur instantanée et sont imperméables.



Les modèles Etac Easy et Smart avec coussin pivotant permettent de tourner facilement sans frottement. Amovible pour le nettoyage. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.

Tabourets de douche Etac	Gris	Bleu	Version basse, gris	Avec coussin pivotant, gris
Tabouret de douche Edge	81801010	81801030	81801040	
Tabouret de douche Easy	81901010	81901020		81901050
Tabouret de douche Smart	81951010	81951020	81951030	81951050

Dimensions Edge

Largeur totale : 52 cm
Largeur du siège : 45 cm max. à la base
Hauteur du siège Edge : 42-57 cm
Hauteur du siège Edge version basse : 34,5-42 cm

Dimensions Easy

Encombrement : 49,5-53,5 cm
Largeur du siège : 40 cm de diamètre
Hauteur du siège : 42-57 cm

Dimensions Smart

Encombrement : 45,5-46,5 cm x 41-43 cm

Largeur du siège : 38-43 cm
Hauteur du siège : 42-57 cm
Hauteur du siège Smart version basse : 34,5-42 cm

Matériaux

Siège : polypropylène
Pieds : aluminium, polyamide
Embouts : TPE
Coussin pivotant : polyéthylène

Poids

Modèle Edge : 2,6 kg
Edge version basse : 2,4 kg
Modèle Easy : 2,8 kg
Modèle Smart : 3,2 kg
Smart version basse : 3 kg

Couleurs



Poids max. de l'utilisateur

Modèles Smart et Easy : 150 kg
Modèle Edge : 130 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%.
Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.