



beka 
hospitec

Carlo Eco
Classic 185

L'outil idéal pour soulever, repositionner et transférer en toute sécurité et sans effort les personnes à mobilité réduite

Carlo Eco Classic 185


offre un maximum de sécurité et de confort...





Avantages pour le manipulateur et le manipulé...

- Travailler de manière saine et ergonomique, car aucun levage manuel n'est requis
- Embase et colonne de levage en aluminium et en acier : très léger et facile à manœuvrer
- Roulettes verrouillables doubles de haute qualité : maniabilité sur tous les sols
- Réglage de la hauteur et base à ouverture électrique : positionnement optimal par rapport au support
- Fléau à 2 points qui peut être abaissé au sol : ramassage au sol possible
- Aucun mouvement pendulaire ou de rotation pendant le levage et le transfert grâce au mécanisme anti-rotation breveté (ARM) : stabilité même pendant le déplacement
- Faible hauteur du châssis : peut facilement passer sous les baignoires et les lits de soins
- Télécommande avec affichage de l'état de charge de la batterie pour savoir quand recharger l'appareil
- La batterie et le chargeur sont compatibles avec tous les lèves-personne BEKA Hospitec
- Grand choix de harnais à boucle confortables et de différentes tailles
- Également disponible avec pèse-personne

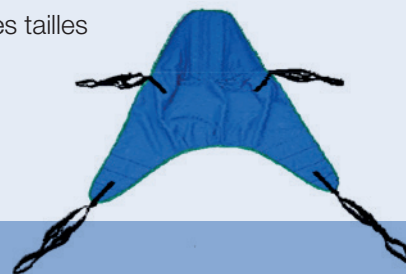

Données techniques

Base (longueur/hauteur)	1.290 mm / 125 mm
Largeur intérieure (fermée/ouverte)	540 mm / 1.040 mm
Largeur extérieure (fermée/ouverte)	700 mm / 1.180 mm
Amplitude d'élévation	1.400 mm
Poids maximal du patient / SWL	185 kg
Unité de contrôle	24 V Linak

Accessoires / Options

Pèse-personne
Sangle de transfert à boucle (disponible en différentes tailles, grandeur standard S-XXL)
Sangle de bain à boucle (disponible en différentes tailles, grandeur standard S-XXL)
Sangle de toilette à boucle (disponible en différentes tailles, grandeur standard S-XL)
Sangle à boucle souples (disponible en différentes tailles, grandeur standard S-XL)
Batterie supplémentaire 24 V
Unité de charge murale externe



ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01
www.evrardmedicale.fr | info@evrardmedicale.fr

