



beka 
hospitec

Consoles de douche

Confort et qualité

Pour des conditions de soin et d'hygiène optimales

Confort et qualité

Pour des conditions de soin et d'hygiène optimales

Le complément idéal des systèmes de douche traditionnels

Les consoles de douche BEKA Hospitec viennent parfaitement compléter les systèmes de douche mobiles comme les chariots douche ou les chaises de douche et de soins.

Pommeau de douche

Le mitigeur thermostatique permet de régler la température de manière fiable. Le flexible de douche extra-long assure un vaste espace de travail, ce qui est particulièrement pratique en cas d'utilisation avec un chariot de douche, pour laver le patient sur toute sa longueur.

Désinfection

Un dispositif optionnel intégré de désinfection permet de désinfecter tous les matériels de douche et de bain utilisés (chariot, chaise...) et d'éviter ainsi toute contamination croisée. Vous pouvez utiliser vos propres liquides de désinfection, et un débitmètre permet d'ajuster la concentration de produit. Des raccords d'eau traditionnels suffisent pour l'installation de notre tableau de commande de douche.

Installation facile

Des arrivées d'eau standards suffisent pour l'installation de nos consoles de douche. Aucune alimentation électrique n'est requise, facilitant l'installation dans les pièces d'eau.

3 versions – Encombrement minimal

La console est proposée en trois versions, dont l'une intègre un WC, qui convient également parfaitement pour les salles de change. Lorsque l'espace est limité, la console offre une solution idéale.

Qualité premium

La console est extrêmement solide et stable grâce à sa fabrication en plastique renforcé à la fibre de verre de première qualité. La surface imperméable et non poreuse répond aux normes d'hygiène plus rigoureuses et est très facile à nettoyer.



BEKA Hospitec développe avec des designers reconnus des matériels innovants et beaux pour améliorer les conditions de travail et apporter plus de confort et de bien-être aux patients.

Avantages pour le soignant

- Solution combinée de douche et de désinfection
- Beaucoup d'applications, dont les toilettes, avec un seul appareil
- Facile à nettoyer
- Protection anti-brûlures et mitigeur thermostatique pour plus de sécurité

Avantages pour le patient

- Solution pour l'hygiène et le confort
- Pas de risque de brûlures
- Système stable et robuste

Avantages pour les investisseurs

- Matériel de qualité et longue durée de vie
- Très bon rapport coût/performance
- Très peu de maintenance

Avantages pour les services techniques

- Pièces détachées de marques standards
- Installation facile
- Support technique téléphone gratuit




Facilement utilisable avec une chaise de transfert pour le passage aux toilettes.



Version DD

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions (Lxlxp)
930505050	Console de douche D avec désinfection	650 x 650 x 180 mm
930505000	Console de douche DD avec désinfection et douche	650 x 650 x 180 mm
930505100	Console de douche DDF avec désinfection, douche et fonction remplissage baignoire	650 x 650 x 180 mm
930506000	Console de douche avec WC avec désinfection, douche et WC	1 500 x 650x 180 mm

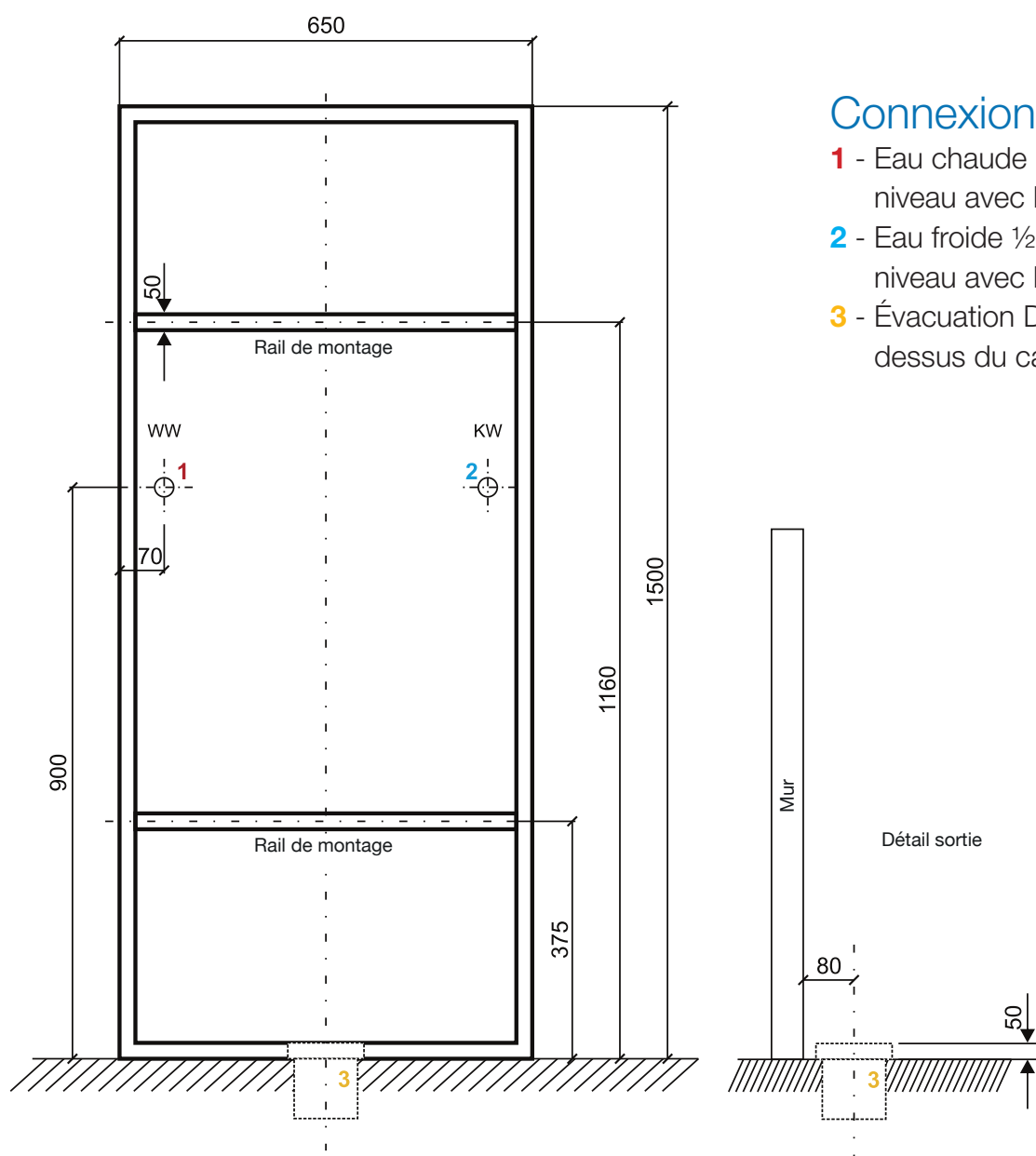

Connexions pré-installées

- 1** - Eau chaude ½", filetage interne, à niveau avec le carrelage
- 2** - Eau froide ½", filetage interne, à niveau avec le carrelage
- 3** - Évacuation DN 100, 50 mm au-dessus du carrelage

