



Pinces de préhension Etac Aktiv

Les pinces de préhension Etac Aktiv sont disponibles en plusieurs modèles. Elles sont légères et leur manche ergonomique permet d'atteindre et d'attraper des objets. L'ouverture du bec est très large, ce qui n'empêche pas la saisie de petits objets. L'une des caractéristiques exclusives de ces pinces est la possibilité de tourner le bec. Les pinces peuvent facilement passer de la position horizontale à la position verticale. Sur tous les modèles, un aimant est présent dans le manche pour la saisie de petits objets métalliques.

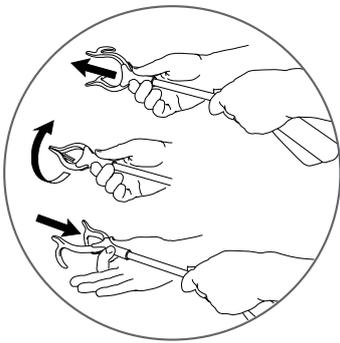

Le bec se règle sur deux positions.

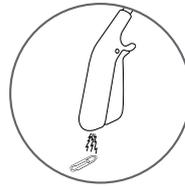

Sur tous les modèles, un aimant est présent dans le manche pour la saisie d'objets métalliques.

Pinces de préhension Etac Aktiv courtes et longues

Le manche de la pince de préhension Etac Aktiv est légèrement coudé pour utiliser la force de la main et procurer une bonne préhension. La force de la main suffit à donner une prise efficace. Le manche est pourvu d'une base d'appui pour l'index afin d'augmenter la précision. Le bec est entièrement recouvert de caoutchouc résistant à l'usure, ce qui assure un maximum de frottement tout en minimisant la force à appliquer.



La pince de préhension existe en 5 longueurs. Les modèles longs sont recommandés pour une utilisation en position debout.

Vous pouvez utiliser la pince de préhension Aktiv de 45 cm pour attraper des objets au sol lorsque vous êtes assis.

Pince de préhension Etac Aktiv avec manche « Power Grip » et crochet

Cette pince de préhension Aktiv avec manche coudé à 90° et repose avant-bras est destinée aux personnes dont la capacité de levage est très limitée. Le bec est équipé de crochets pour rapprocher ou repousser des objets. La pince de préhension Aktiv avec crochet dispose également de becs rotatifs et d'un aimant pour la saisie d'objets métalliques de petite taille.



Le manche coudé permet à l'utilisateur de garder le poignet droit et de favoriser la prise. Le repose avant-bras assure une préhension stable et efficace.



Pince de préhension Aktiv avec manche « Power Grip » et crochet.

Pince de préhension Etac Aktiv avec crochet

La pince de préhension Etac Aktiv avec crochet aide les utilisateurs à s'habiller et à se déshabiller. Elle est aussi légère que les autres pinces de préhension Aktiv et possède les mêmes fonctionnalités.



La pince de préhension Aktiv avec crochet est un outil exemplaire pour atteindre des objets et se vêtir.



Le caoutchouc à l'intérieur des crochets assure une bonne prise.

Description

Description	N° d'article
Pince de préhension Aktiv de 45 cm	80505004
Pince de préhension Aktiv de 60 cm	80505007
Pince de préhension Aktiv de 70 cm	80505003
Pince de préhension Aktiv de 80 cm	80505008
Pince de préhension Aktiv de 90 cm	80505009
Pince de préhension avec manche « Power Grip » et crochet, 60 cm	80505005
Pince de préhension avec crochet, 45 cm	80505006

Capacité de levage

Les pinces de préhension ne doivent pas être utilisées pour soulever des charges de plus de 2 kg.

Poids

Pince de préhension de 45 cm	: 111 g
Pince de préhension de 70 cm	: 128 g
Pince de préhension avec manche « Power Grip »	: 139 g
Pince de préhension avec crochet	: 117 g

Matériaux

Manche et bec : polycarbonate/ABS
Repose avant-bras et support bec : polyamide
Tube : aluminium

Conception

Ergonomidesign